

OPLEV DEN BEDSTE SYNERGI VED GENBEHANDLING AF INSTRUMENTER

Aniosyme Synergy WD

TRIPLE-ENZYMATISK MIDDEL FOR SOFISTIKERET INSTRUMENT GENBEHANDLING

Aniosyme Synergy WD er et mildt alkalisk detergent, beregnet til automatisk instrumentrengøring. Produktet har perfekte egenskaber med specielt udviklet triple-enzymatisk receptur, silikatfri receptur som giver en fremragende materiale kompatibilitet, ved laveste dosering.

- **KRAFTFULD** - Særdeles kraftfuld rengørings effekt
- **ENZYMATISK** - Tripleenzymatisk receptur; effektivt mod alle urenheder
- **EFFEKTIVT** - Særdeles effektivt uanset vandkvalitet



Aniosyme Synergy WD

Triple-enzymatisk middel for sofistikeret instrument genbehandling



Aniosyme Synergy WD
5 L Dunk

KRAFTFULD

Dokumenteret effektivitet efter 5 minutter kombineret med god materialekompatibilitet.

ENZYMATISK

Fjerner alle slags besmudsninger gennem fleksibel dosering på grund af den specielle triple enzymatiske formulering.

EFFEKTIVT

Den laveste koncentrationseffekt er vist fra 0,2% til 0,5% med fremragende slutresultat.

KEMISK-FYSISK DATA

- | | | |
|---|------|---------------------|
| • Densitet | 20°C | 1,16 g / ml |
| • pH værdi (koncentrat) | 20°C | 8,5 |
| • pH område* (dosering 2 - 5 ml/l) | 20°C | 9,6 - 10,3 |
| • Ledningsevne
(dosering, 2 - 5 ml/l i blødt vand) | 20°C | 0,30 - 0,64 mS / cm |

*Måling af pH-værdien under driftsbetingelser skal altid udføres med en pH-meter med temperaturkompensation.

ORDRE INFORMATION

PRODUKT	FORPAKNING	VARENUMMER
Aniosyme Synergy WD	2 x 5 L	3104300



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Forhandles af:
ECOLAB APS.
Høffdingsvej 36.
DK 2500. Valby
Danmark

ANVENDELSESOMRÅDE

Triple enzymatisk detergent.
Rengøring af kirurgisk og medicinske instrumenter, medicinsk udstyr i Instrumentvaskemaskiner og tunnelvaskere. Kan bruges i både hårdt og behandlet vand.

BRUGSANVISNING

- Koncentreret opløsning til professionel anvendelse
- Til brug i automatiske instrumentvaskere og tunnelvaskere - doseringer mellem 0,2 og 0,5 %
- Virksomt efter 5 minutter
- Tilpas koncentrationen efter kontaktid og temperaturer, vandmængde, besmudsningsgraden og ta bort program
- Maximumtemperaturer: 60°C

INDEHOLDER

Anionisk og kationiske overflade aktive stoffer med antiskum effekt, kompleksdannere, enzymkomplex (protease, lipase og amylase).

OPBEVARING


Farligt - respekter sikkerhedsreglerne ved anvendelse (udarbejdet i henhold til de gældende europæiske regler for klassificering og mærkning af kemiske produkter). Opbevaring: mellem +5°C og +25°C.

CERTIFICERING

Certifikater kan rekvireres.

MEDICINSK UDSTYR ANVEND MED FORSIGTIGHED

Læs label og produktinformation.

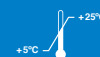

UDELUKKENDE TIL PROFESSIONEL ANVENDELSE

ECOLAB®

www.ecolab.dk